



## Description:

Venus Comfort Gel is a unique, sustained release, 3% potassium nitrate and 0.11% weight fluoride ion, sticky, viscous teeth desensitizing gel. Venus Comfort Gel is designed to be used in a custom-fabricated tray.

## Indications:

Venus Comfort Gel provides a film-like varnish for sensitive teeth, sealing dentinal tubules of exposed dentin and other areas where post-operative sensitivity is a concern. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment of dentin sensitivity.

## Procedure:

1. Read and understand instructions before using or dispensing to patient.
2. Fabricate tray to meet patient's needs. Areas of sensitivity should be indicated on cast before sending the model. If patient already has a custom bleaching tray, Venus Comfort Gel maybe be applied in the same tray and manner as bleaching gel.
3. Venus Comfort Gel is dispensed in 1.2ml unit dose syringes. A complete arch should use most of the contents of a syringe. If sensitivity is localized, place gel in affected area(s) and a small amount in the molar region to hold tray in place.
4. The length and number of times tray is worn depends on condition, patient, and clinician. Recommended treatment times can range from 15 minutes to 1 hour.
5. Tray should be removed at meal times. Immediately following tray removal, patient should brush and rinse teeth with water to remove all remaining gel. DO NOT swallow solution during rinsing. Wash tray and store in a tray storage case. Fresh gel should be used with each application.
6. Gel may be warmed before placing in tray to avoid thermal sensitivity.

**Precautions:**

1. Keep desensitization product away from small children.
2. This product is NOT for nighttime use.
3. Do not use tobacco products or eat while using this product.
4. Not intended for use by pregnant women.
5. If any problems occur, discontinue treatment and notify your dentist.
6. Keep out of heat and/or sunlight at all times. Venus Comfort Gel should be stored at room temperature. Shelf life is 36 months.
7. Patients should not swallow large volumes of Venus Comfort Gel. Excess material at insertion and residue upon removal should be brushed off and rinsed: DO NOT swallow.

**General Precautions:**

1. For Professional use only.
2. Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment.  
Use only as directed.
3. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.

## **FR Gel Confort**

### **Description :**

Le gel Confort Vénus est un gel de désensibilisation des dents collant et visqueux unique à libération prolongée, au nitrate de potassium 3% et une teneur poids pour poids de 0,11% d'ions fluorure. Le Gel Confort Vénus est conçu pour être utilisé dans un porte-empreinte fait sur mesure.

### **Indications :**

Le Gel désensibilisant Confort Vénus forme un film ressemblant à un vernis sur les dents sensibles, qui scelle les canalicules dentinaires de la dentine exposée et des autres zones dans le cas d'un problème de sensibilité post-opératoire. Ce produit est utilisé en cabinet par un professionnel dentaire ou fournit au patient pour un traitement à domicile de la sensibilité dentinaire.

### **Procédure :**

1. Lisez et comprenez les instructions avant d'utiliser ou de dispenser le produit à un patient.
2. Façonnez le porte-empreinte répondant aux besoins du patient. Les zones de sensibilité devraient être indiquées sur le moule avant de nous envoyer le modèle. Si le pa tient possède déjà un porte-empreinte de blanchiment sur mesure, le Gel Confort Vénus peut être appliqué dans le porte-empreinte de la même façon que le gel de blanchiment.
3. Le Gel Confort Vénus est dispensé dans des seringues unitaires de 1,2 ml. Un arc complet devrait utiliser la plupart du contenu d'une seringue. Si la sensibilité est localisée, mettez le gel dans la (les) zone(s) affectée(s) et une petite quantité dans la région molaire pour tenir le porte-empreinte en place.
4. La durée et le nombre de fois que le porte-empreinte est porté dépend de l'affection, du patient et du clinicien. Les périodes de traitement recommandées varient entre 15 minutes et 1 heure.

5. Le porte-empreinte devrait être retiré pendant les repas. Immédiatement suivant le retrait du porte-empreinte, le patient devrait se brosser les dents et les rincer avec de l'eau pour enlever toute trace du gel. N'avez PAS la solution pendant le rinçage. Lavez le porte-empreinte et rangez-le dans son étui. Du gel frais devrait être utilisé avec chaque application.
6. Le gel peut être réchauffé avant de mettre le porte-empreinte en place pour éviter une sensibilité thermique.

### **Précautions :**

1. Gardez le produit de désensibilisation hors de la portée des petits enfants.
2. Ce produit N'est PAS fait pour une utilisation nocturne.
3. N'utilisez pas de produits tabagiques et ne mangez pas lors de l'utilisation de ce produit.
4. N'est pas destiné à une utilisation par des femmes enceintes.
5. Si des problèmes se produisent, arrêtez le traitement et notifiez votre dentiste.
6. A tenir éloigné de la chaleur et/ou de la lumière du soleil en tous temps. Le Gel Confort Vénus devrait être stocké à température ambiante. La durée de conservation est de 36 mois.
7. Les patients ne devraient pas avaler de grandes quantités de Gel Confort Vénus.  
L'excédent de matériau lors de l'insertion et le résidu présent lors du retrait devraient être brossés et rincés. NE PAS avaler

### **Précautions générales.**

1. Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
2. Revoir les instructions, les précautions et les fiches toxicologiques avant de commencer le traitement. A utiliser uniquement selon les instructions.
3. Confirmez que le patient n'a pas d'allergies connues aux matériaux du traitement.

# ES Comfort Gel

## Descripción:

Venus Comfort Gel es un exclusivo desensibilizante en gel para piezas dentales con liberación sostenida de 3% de nitrato de potasio y 0,11% p/p de iones de flúor. Venus Comfort Gel ha sido formulado para utilizar en una cubeta individual.

## Indicaciones:

Venus Comfort Gel genera una película tipo barniz para dientes sensibles, sellando los túbulos dentinarios de la dentina expuesta y otras zonas en las que preocupe la sensibilidad postoperatoria. El producto es para uso del profesional en el consultorio o para ser entregado al paciente para tratamiento de la sensibilidad dentinaria en su domicilio.

## Procedimiento:

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de utilizar o entregar al paciente.
2. Fabrique la cubeta para cubrir las necesidades del paciente. Las áreas sensibles deberían ser indicadas en el modelo antes de enviarlo. Si el paciente ya posee una cubeta de blanqueamiento individual, Venus Comfort Gel puede ser aplicado en la misma cubeta y de la misma forma que el gel blanqueador.
3. Venus Comfort Gel se ofrece en jeringas de dosis unitaria de 1.2ml. Una arcada completa debería utilizar la mayor parte del contenido de la jeringa. Si la sensibilidad es localizada, coloque el gel en la(s) zona(s) afectada(s) y una pequeña porción en la región molar para mantener la cubeta en posición.
4. El tiempo de colocación y la cantidad de veces en que se debe utilizar la cubeta depende de la condición, del paciente y del profesional. Los tiempos de tratamiento recomendados oscilan de 15 minutos a 1 hora.
5. La cubeta debería retirarse para comer. Inmediatamente después de retirarla de boca, el paciente debería cepillarse los dientes y enjuagarlos con agua para retirar todos los remanentes de gel. NO TRAGUE la solución durante el enjuague. Lave la cubeta y almacénela en su estuche. Para cada aplicación debe utilizarse gel fresco.
6. El gel puede ser entibiado antes de colocarlo en la cubeta para evitar sensibilidad térmica.

**Precauciones:**

1. Mantenga este producto desensibilizante lejos del alcance de los niños.
2. Este producto NO es para uso nocturno.
3. No utilice productos derivados del tabaco ni coma mientras utilice este producto.
4. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas.
5. De surgir cualquier problema, descontinúe el tratamiento y notifique a su dentista.
6. Mantenga lejos del calor y/o luz solar en todo momento. Venus Comfort Gel debería ser almacenado a temperatura ambiente. La vida útil es de 36 meses.
7. Los pacientes no deberían tragar grandes cantidades de Venus Comfort Gel. El exceso de material durante la inserción y los residuos al remover la cubeta deberían ser retirados con cepillo dental y enjuagados. NO TRAGAR.

**Precauciones Generales:**

1. Sólo para uso profesional.
2. Revise las instrucciones, precauciones y MSDS antes de comenzar el tratamiento. Utilice sólo como se indica.
3. Confirme que el paciente no tenga alergias conocidas a los materiales del tratamiento.

Legend:

Légende :

Leyenda:



Use by date  
A utiliser avant le  
Utilice antes de



See instructions  
Voir le mode d'emploi  
Ver instrucciones



Batch Code  
Code de lot  
Código de partida



Keep out of reach of children  
A garder hors de la portée des enfants  
Mantenga lejos del alcance de los niños




Recommended Storage Temperature  
Température de stockage recommandée  
Temperatura de almacenaje recomendada


Not for injection  
Ne pas injecter  
No es para ser inyectado

Kulzer syringes have an expiration date stamped on them consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year. Kulzer syringes can also have the actual expiration date and lot number printed on them.


## Venus Comfort Gel

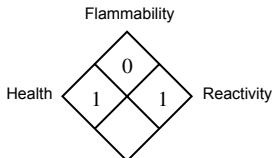

## Gel Confort Vénus

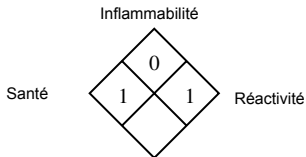

## Venus Comfort Gel

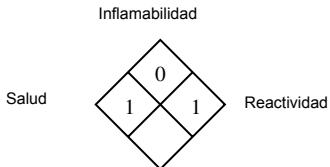

### HAZARD RATING

- 4 = Severe
- 3 = Serious
- 2 = Moderate
- 1 = Slight
- 0 = Minimal

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.  
Keep out of reach of children.

Distributed by:



**KULZER**  
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP

Kulzer, LLC.  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614  
(800) 431-1785  
Made in USA

17164.2 052418