


Venus White^{pro}

Make every day
a Venus White day.



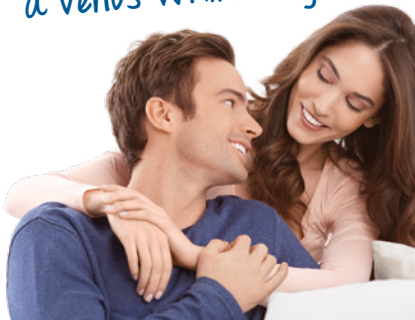

Venus White[®]*pro*

Venus White[®]*pro*

Whitening Gel Application Instructions

Important: Please read before using teeth whitening gel.

Teeth whitening (bleaching) gel will only whiten natural teeth. Results may vary as teeth whiteners do not work on certain stains. It is important to consult with your dentist if you have any concern about stains on your teeth before using this product.

1. Brush and floss teeth. Venus White Pro is most effective on clean teeth.
2. Make sure trays are clean and dry prior to applying Venus White Pro.
3. Remove syringe from case and snap tip cover from the end.



4. To load the tray with Venus White Pro, depress the plunger and fill each tooth in the tray with a pearl of gel. Each tray will typically use 1/2 to 1/3 of a syringe. (Figure 1)
5. Position tray over your teeth and gently press tray to move the gel into place. Wipe excess gel, which seeps over the brim of the tray, off of your gums with a tissue or your finger. (Figure 2)

Venus White Pro

Whitening Gel Application Instructions (continued)

6. Wear tray for prescribed amount of time depending on application choice. If sensitivity occurs, discontinue use for 24 hrs.

35%–Daytime use: wear 15 minutes, twice a day OR wear 30 minutes, once a day.

22%–Daytime use: wear 60 minutes, once or twice a day.

16%–Daytime use: wear 4–6 hours, once per day.

7. After whitening, remove the tray and rinse your teeth. Brush away any remaining gel.

8. Clean bleaching trays with a toothbrush and cold water. Store trays in the tray holder and gel in a cool dry place away from heat and direct sunlight.

Venus White Pro 16% and 22% SHOULD BE REFRIGERATED FOR LONG TERM STORAGE. Shelf life is 1 year unrefrigerated and 2 years refrigerated. **Venus White Pro 35%** MUST BE REFRIGERATED WHEN NOT IN USE. Shelf life is 2 years refrigerated. Use only in accordance with these instructions.

Warnings: Keep product away from children. **DO NOT** use if pregnant or breastfeeding. **DO NOT** use tobacco products or eat while wearing bleaching trays.

1. If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult your dentist. Products containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age.
2. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist.
3. Avoid swallowing Venus White Pro gel or part thereof.
4. Avoid contact of the product with the eye.
5. Avoid direct contact of the active surface of Venus White Pro with the gums and/or salivary flow.
6. Do not use if you are allergic to any ingredient in this product.

Venus White Pro

Instrucciones de aplicación del gel blanqueador

Importante: Lea estas instrucciones antes de utilizar el gel blanqueador para dientes. Este blanqueador dental está indicado únicamente para dientes naturales. Los resultados pueden variar debido a que los blanqueadores no actúan en determinadas manchas. Es importante que consulte con su dentista antes de utilizar este producto si tiene alguna consulta acerca de las manchas en sus dientes.

1. Límpiense los dientes con cepillo y seda dental. Venus White Pro actúa mejor en los dientes limpios.
2. Asegúrese de que las cubetas están limpias y secas antes de aplicar Venus White Pro.
3. Saque la jeringa del estuche y retire la tapa del extremo.
4. Para cargar la cubeta con Venus White Pro, apriete el émbolo y rellene cada diente de la cubeta con una perla de gel. Cada cubeta suele necesitar de 1/2 a 1/3 de jeringa.
5. Colóquese la cubeta en los dientes y presione suavemente para mover el gel Venus White Pro a su sitio. Retire, con ayuda de un pañuelo o con el dedo, el exceso de gel que sobresalga por el borde de la cubeta a la altura de las encías.
6. Use la cubeta por el tiempo indicado según la aplicación que ha escogido. Si presenta sensibilidad, descontinúe el uso por 24 horas.

35%–Uso durante el día: use por 15 minutos, dos veces al día O use por 30 minutos, una vez al día.

22%–Uso durante el día: use por 60 minutos, una o dos veces al día.

16%–Uso durante el día: use de 4 a 6 horas, una vez al día.

7. Después del blanqueado, quítese la cubeta y aclárese los dientes. Elimine cualquier resto de gel ayudándose con el cepillo de dientes.
 8. Limpie las cubetas con un cepillo de dientes y agua fría. Guarde las cubetas en su soporte y el gel en un lugar fresco y seco, alejado del calor y de la luz solar directa.
-

Venus White Pro 16% y 22% DEBEN REFRIGERARSE PARA ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO. El producto expira después de 1 año si no se refrigera y a los 2 años si está refrigerado. **Venus White Pro 35% DEBE REFRIGERARSE CUANDO NO SE USA.** El producto expira a los 2 años si está refrigerado. Use sólo de acuerdo con estas instrucciones. **AVISOS:** Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. **NO** lo utilice durante el embarazo o la lactancia. **NO** fume ni coma mientras lleva las cubetas blanqueadoras.

1. En caso de irritación (enrojecimiento, hinchazón, dolor) de las encías o la boca, deje de utilizar el producto y consulte a su dentista. No se recomienda el uso de productos con peróxidos en niños menores de 12 años.
2. La utilización del producto durante un período de más de 14 días sólo debe hacerse bajo la supervisión de un dentista.
3. No ingiera gel Venus White Pro.
4. Evite el contacto con los ojos.
5. Evite el contacto directo de la superficie activa de Venus White Pro con las encías y/o la saliva.
6. No lo use si es alérgico a algún ingrediente de este producto.

Venus White Pro

Instructions pour l'application de gel de blanchiment

Important : Veuillez lire ces instructions avant utilisation du gel de blanchiment dentaire.

Le gel de blanchiment (décoloration) dentaire ne blanchit que les dents naturelles. Les résultats peuvent varier, car les blanchisseurs dentaires n'opèrent pas sur certaines taches. Il est important de consulter votre dentiste préalablement à l'utilisation de ce produit si vous avez des craintes au sujet de taches sur vos dents.

1. Brossez et passez vos dents au fil dentaire. L'efficacité de Venus White Pro est accrue sur des dents propres.
2. Assurez-vous que les gouttières sont propres et sèches avant d'appliquer Venus White Pro.
3. Retirez la seringue de l'étui et cassez l'extrémité.
4. Pour remplir la gouttière de Venus White Pro, appuyez sur le piston et remplissez chaque dent de la gouttière avec une goutte de gel. Chaque gouttière nécessitera 1/2 à 1/3 de seringue.
5. Placez la gouttière par-dessus vos dents et compressez doucement la gouttière pour mettre en place le gel Venus White Pro. Essuyez le gel excédentaire qui déborde de la gouttière sur vos gencives à l'aide de vos doigts ou d'un morceau de tissu.
6. Porter le porte-empreinte pendant la période de temps prescrite selon le choix d'application. En cas de sensibilité, arrêter l'utilisation pendant 24 heures.

35% - Utilisation pendant la journée : porter pendant 15 minutes, deux fois par jour
OU porter 30 minutes une fois par jour.

22% - Utilisation pendant la journée : à porter pendant 60 minutes, une à deux fois par jour.

16% - Utilisation pendant la journée : porter 4 à 6 heures une fois par jour.

- Après le blanchiment, retirez la gouttière et rincez vos dents. Brossez le reste de gel Venus White Pro.
 - Nettoyez les gouttières à l'aide d'une brosse à dents et d'eau froide. Rangez les gouttières dans le support prévu à cet effet et le gel dans un endroit frais et sec, à l'écart d'une source de chaleur et des rayons solaires directs.
-

Venus White Pro à 16% et à 22% DEVRAIT ETRE REFRIGERE POUR UN STOCKAGE A LONG TERME. La durée de conservation est d'1 an sans réfrigération et de 2 ans réfrigéré. **Venus White Pro à 35% DOIT ETRE REFRIGERE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISE.** La durée de conservation est de 2 ans au réfrigérateur. A utiliser uniquement conformément à ces instructions. **PRÉCAUTIONS :** Garder hors de la portée des enfants. **NE PAS** utiliser en cours de grossesse ou d'allaitement. **NE PAS** fumer ou manger lors du port des gouttières de blanchiment.

- En cas d'irritation (ex.: rougeur, gonflement, douleur) des gencives ou de la bouche, interrompez l'utilisation et consultez un dentiste. L'utilisation des produits contenant des peroxydes est déconseillée chez les enfants de moins de 12 ans.
- Une utilisation sur des périodes de plus de 14 jours doit être réalisée uniquement sous la surveillance d'un dentiste.
- Évitez d'avaler tout ou partie du gel Venus White Pro.
- Évitez tout contact du produit avec les yeux.
- Évitez tout contact de la surface active de Venus White Pro avec les gencives et/ou le flux salivaire.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergiques à des ingrédients présents dans ce produit.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

For more information, visit
www.MyVenusSmile.com

Thank you for joining us in our commitment to support the fight against breast cancer. Kulzer donates a percentage of every sale of Venus White Pro to support breast cancer research.



Kulzer, LLC

4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
Phone: 1-888-48-VENUS
Fax: 1-877-271-5211
www.MyVenusSmile.com

25711.03 080317

© 2017 Kulzer, LLC. Venus® is a trademark of Kulzer GmbH.